

Le skiascope manuel pour une réfraction objective.

Le skiascope BETA 200 permet de mesurer la réfraction de l'œil. Les défauts d'adaptation comme la myopie et l'hypermétropie ainsi que l'astigmatisme peuvent être détectés et déterminés.

Pour cela, deux modèles d'instruments sont disponibles : le skiascope à spot au faisceau lumineux rond et le skiascope conventionnel à trait au faisceau lumineux en forme de trait qui facilite la reconnaissance de la réfraction.

ParaStop® HEINE et filtre de polarisation.

Le Skiascope BETA200 avec ParaStop offre grâce à son optique de pointe de haute qualité un reflet du fond d'œil exceptionnellement clair et permet une reconnaissance aisée du point d'inversion. Le ParaStop a été conçu par HEINE pour faciliter le réglage précis du faisceau lumineux parallèle. En outre, le ParaStop permet, lors de la détermination de l'axe des cylindres, l'obtention aisée et rapide d'un résultat précis. Il en va de même pour la vérification de la correction des cylindres dans des verres correcteurs.

Skiascope HEINE BETA200® avec ParaStop®

Réglage précis du faisceau lumineux parallèle



- **ParaStop.** Réglage précis du faisceau lumineux parallèle.
- **Forme ergonomique.** Abrite parfaitement l'orbite oculaire de la lumière ambiante.
- **Technologie XHL Xénon Halogène.** Lumière blanche. Reflet du fond d'œil clair, reconnaissance aisée du point d'inversion.
- **Skiascope à fente ou à spot.** Par simple échange de l'ampoule.
- **Commandes de réglage en métal.** Robuste, grande longévité.
- **Un seul réglage pour la focalisation et la rotation de la fente.** Maniement aisé avec un seul doigt.
- **Étanche à la poussière.** Sans entretien.
- **Filtre de polarisation intégré.** Élimine la lumière diffuse et les reflets internes.
- **Filtre orange amovible (en option).** Réduit les désagréments pour le patient sans préjudice pour le reflet du fond d'œil.
- **Appui-front pour porteur de lunettes.** Pratique et stable.
- **Crans pour cartes de fixation (en option).** Pour la skiascopie dynamique.

Skiascope à fente BETA200	2,5V	3,5V
avec ampoule XHL Xénon halogène sans poignée	C-001.15.353	C-002.15.353
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène	X-001.88.087	X-002.88.089
Ampoule de rechange XHL Xénon halogène pour convertir en skiascope à spot	X-001.88.088	X-002.88.090

Filtre orange monté sur la lampe amovible pour patients sensibles à la lumière [01]	C-000.15.359
Fiches de fixation avec support pour la skiascopie dynamique	C-000.15.360

• ParaStop® breveté

• Commandes de réglage en métal

• Étanche à la poussière

• Skiascope à fente et à spot :
Par simple échange de l'ampoule.

Troussets ophtalmologiques HEINE

Trousse complète avec : **Skiascope à fente BETA 200**1 ampoule de recharge
étui rigide

Troussets Skiascope BETA 200	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Poignée à piles	C-034.10.118*		
BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant		C-034.20.376	C-034.27.376
BETA TR Poignée rechargeable avec transformateur à fiche		C-034.20.384	C-034.27.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT 300		C-034.20.420	
 BETA L Poignée rechargeable et chargeur NT 300			C-034.29.420

Trousse complète avec : **Ophthalmoscope BETA 200S, Skiascope à fente BETA 200**1 ampoule de recharge pour chaque instrument
étui rigide

Troussets de diagnostic BETA	2,5V	3,5V (NiMH)	3,5V 
BETA Poignée à piles	C-262.10.118*		
BETA R Poignée rechargeable pour prise de courant		C-262.20.376	C-262.27.376
BETA TR Poignée rechargeable avec transformateur à fiche		C-262.20.384	C-262.27.384
BETA NT Poignée rechargeable et chargeur NT 300		C-262.20.420	
 BETA L Poignée rechargeable et chargeur NT 300			C-262.29.420


*Egalement livrable avec poignée **X-001.99.120** (convient pas dans étui rigide). Merci de l'indiquer lors de la commande.

: Poignée rechargeable avec affichage du statut de charge dans le culot.

Une entreprise est entrée dans l'histoire et a donné son nom à une production d'une qualité exceptionnelle : HEINE.

Entreprise familiale fondée en 1946, riche en traditions, aujourd'hui leader sur le marché international, avec une gamme complète d'instruments de diagnostic. Les produits HEINE répondent à toutes les normes internationales (ISO/CE) et sont à la pointe de la technologie, tant pour la précision que pour le design et l'ergonomie. La recherche et le développement résolument tournés vers l'avenir ont su créer une base technologique solide et diversifiée pour une production d'avant-garde, dans le respect de la qualité. A travers le monde, plus de 500 employés contribuent à cette réussite.

www.heine.com

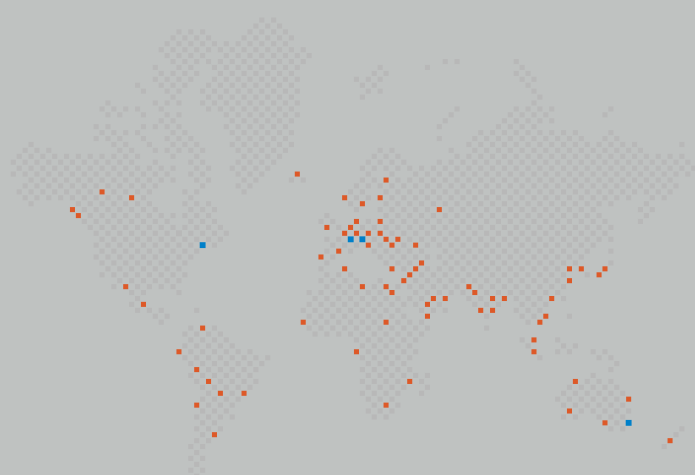

■ FILIALES HEINE
■ DISTRIBUTEURS HEINE

ALLEMAGNE

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

ETATS-UNIS

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 7 42-71 03
Fax (603) 7 42-72 17
Toll Free (800) 367-4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIE

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SUISSE

HEINE (Schweiz) AG
Tobelackerstr. 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

Votre distributeur

10/11. A-000.00.100 f

